



FiltaNeb™

Nebulizador Cirrus™2 kit de máscara Intersurgical EcoLite™ não ventilada para adulto com filtro e tubo



Oxigenoterapia e Aerosolterapia ▪ Terapia de Nebulização

Uma opção de produto concebida para reduzir a entrada de partículas no ambiente durante a terapia de nebulização, e uma resposta à evolução das necessidades do mercado mundial de cuidados de saúde. O produto consiste numa máscara não ventilada baseada na máscara Intersurgical EcoLite, com um filtro na via de exalação de gás. O vedante da máscara tem uma cor verde que permite distinguir esta máscara não ventilada das máscaras de aerossóis padrão. Para garantir o melhor ajuste possível, o kit de máscaras inclui uma alça para ajuste cabeça adicional.

O sistema proporciona uma redução de >95% de partículas no ambiente, o que permite minimizar a fuga de emissões e gases exalados potencialmente infetados durante a terapia de nebulização e, assim, reduzir o risco para os profissionais de saúde.

O nebulizador Cirrus2 apresenta várias características, incluindo um copo graduado para monitorizar as doses de fármaco no nebulizador.

O copo possui um sistema de abertura fácil que permite encaixar e desencaixar o nebulizador rodando a tampa até um quarto. Isto acelera o processo de enchimento e proporciona um vedante mais estanque entre o copo e o corpo do nebulizador.

O nebulizador Cirrus2 foi concebido para administrar fármacos para deposição traqueobrônquica. Com um fluxo de gás administrado de 8 l/min, o diâmetro mediano mássico (DMM) é de 3,1 microns.

Vedante do nariz encurvado

Adapta-se a diferentes formatos de nariz para evitar a entrada de aerossóis nos olhos do doente

Filtro na porta de exalação

Reduz a entrada de partículas no ambiente durante a terapia de nebulização

Copo graduado para monitorização das doses

Preparação mais rápida

Baixo volume residual

Menor desperdício do fármaco

Alça de cabeça suplente

para melhorar a estabilidade da máscara no rosto do doente

Vedante facial suave

Maior conforto do doente

Vedante de máscara verde


Permite a distinção entre a máscara não ventilada e as máscaras de aerossóis padrão

Opção entre a posição “abaixo do queixo” ou “no queixo”

Permite um melhor ajuste a vários formatos de rosto

Abertura fácil

Encaixa e desencaixa facilmente

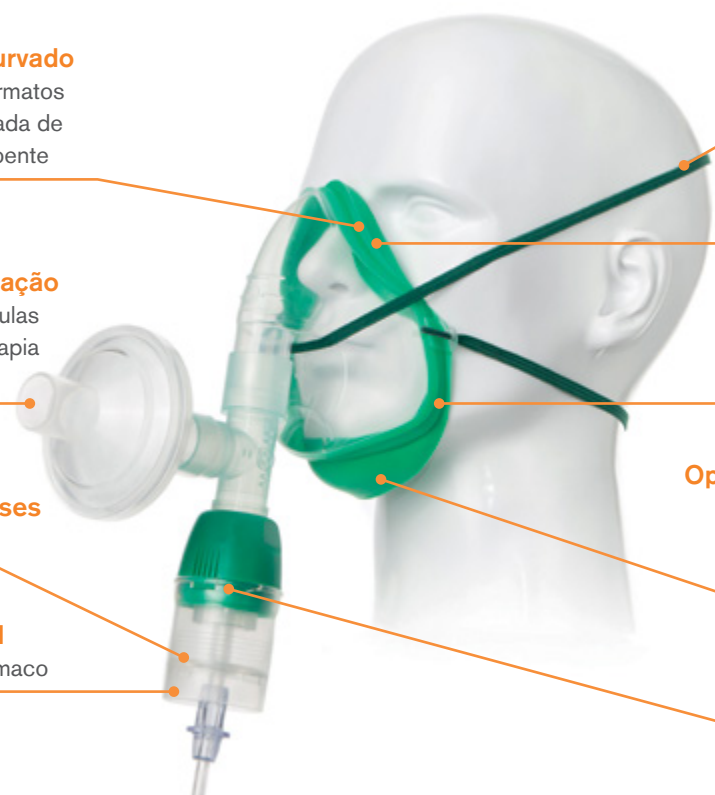

Código	Descrição	Comprimento do tubo	Qtd. por caixa
1453044	FiltaNeb™ Nebulizador Cirrus2, kit Intersurgical EcoLite de máscara não ventilada para adulto com filtro e tubo	2.1m	12

Produto com baixo impacto ambiental



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177, Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



"O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015"

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.