



Cânula nasal de alto fluxo i-flo™



Cuidados intensivos ▪ Cânula nasal de alto fluxo i-flo



Cânula nasal de alto fluxo i-flo™

A i-flo da Intersurgical é uma interface do doente de uso único destinada à administração de Oxigenoterapia de Alto Fluxo (OAF). A i-flo está disponível em três tamanhos e destina-se ao uso em doentes adultos em contexto hospitalar.

A OAF tornou-se numa das principais formas de suporte respiratório para doentes com insuficiência respiratória hipoxémica e considera-se que traz vários benefícios face a oxigenoterapias mais convencionais. Estes benefícios incluem:

- Melhor oxigenação
- Menor trabalho respiratório
- Melhor limpeza de secreções
- Melhor tolerância pelo doente
- Intubação evitada^[1]

A i-flo completa a vasta gama de interfaces e sistemas respiratórios da Intersurgical, e o seu design discreto foi desenvolvido na ótica do desempenho e conforto do doente.

A i-flo inclui um número de características e benefícios para ajudar a garantir a melhor administração de oxigenoterapia possível.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



Adaptável e seguro



O cotovelo rotativo até 180° único da i-flow permite posicionar o equipamento da cabeceira da cama de forma fácil e prática.



O sistema de gestão de tubos i-flow com clipe e fita de fixação de nastro mantém segura a tubagem do sistema respiratório e permite ao doente realizar movimentos livremente, sem se preocupar com a remoção da cânula ou desconforto.

Confortável e estável



O design anatómico do suporte facial posiciona a tira de cabeça acima das orelhas do doente, minimizando a fricção e o desconforto.

O suporte facial flexível e semirrígido também garante que a pressão da tira é distribuída da mesma forma em toda a face do doente. Isto aumenta a estabilidade e suporte da cânula e permite prevenir o desenvolvimento de "pontos quentes" devido à pressão.





Cânula nasal de alto fluxo i-flo™

Código	Descrição	Qtd. por caixa
7300000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, pequena	7
7301000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, média	7
7302000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, grande	7


Pedir informações

Ver vídeo



Sistema respiratório com tubo articulado único

Código	Descrição	Qtd. por caixa
2060310	Tubo articulado Flextube de 22 mm com fio aquecido único, câmara de enchimento automático e tubo articulado suplente.	7

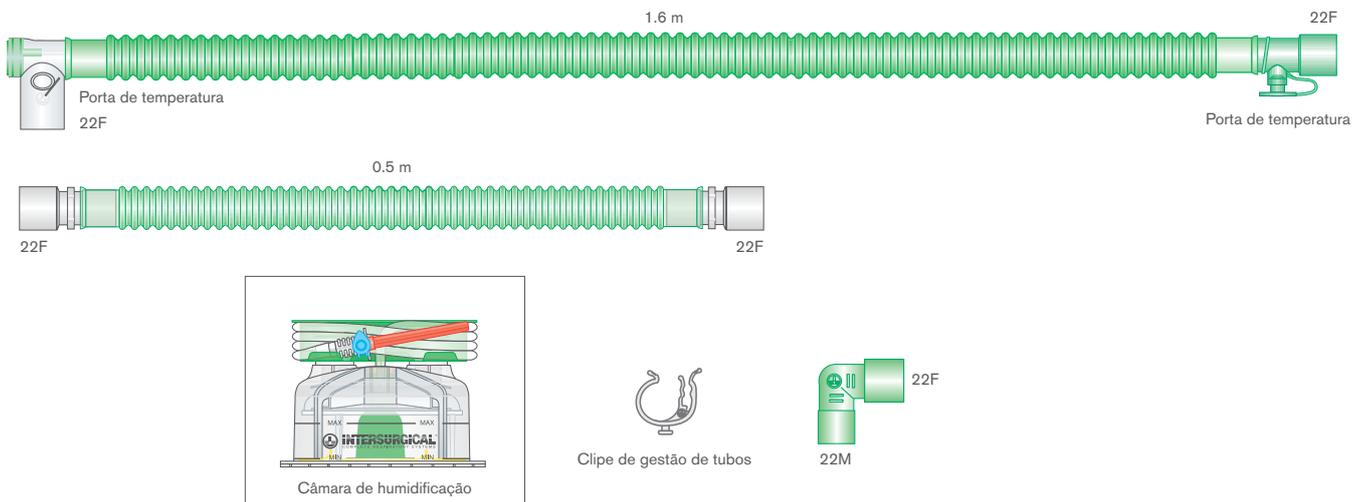

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.53 PT • Issue 4 01.25



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177, Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda está certificado com a ISO 9001