

STARMed CaStar Ped

Capacete pediátrico para terapia CPAP e ventilação mecânica não invasiva (VNI)



Cuidados Intensivos ▪ Interfaces do doente ▪ **STARMed**

Capacete pediátrico StarMed CaStar Ped para a terapia CPAP e VNI

StarMed CaStar Ped

O CaStar Ped é uma interface para pediatria confortável, versátil e leve para paciente CPAP e VNI. Foi concebido para oferecer uma alternativa aos métodos tradicionais de terapia CPAP e VNI. O CaStar Ped é bem tolerado por longos períodos e pode reduzir os riscos associados tanto à entubação endotraqueal como ao uso de máscaras faciais. Pode ser utilizado tanto em posição semi-reclinada como supina, proporcionando uma alternativa ideal para a terapia CPAP e VNI.


Technical Features

- Fabricado a partir de materiais sem ftalatos
- Conectores 22M/22F em conformidade com a norma ISO (versão CPAP)
- Conectores 22M em conformidade com a norma ISO (versão VNI)

- Equipado com manómetro integrado para verificar a presença de pressão dentro do capacete (apenas na versão CPAP)
- Cintas de fixação das axilas confortáveis e atraumáticas
- Cintas de fixação nas axilas confortáveis e atraumáticas - Duas portas de acesso seladas versáteis adequadas para sondas ou cateteres de vários calibres
- Novo design da porta de acesso ao doente. Equipada com válvula anti-asfíxia bidirecional que abre automaticamente em caso de falha de pressão
- A vedação hermética do sistema é conseguida através de uma membrana elástica em contacto com a parte superior do tronco quando o capacete é insuflado

Bibliografia:

- Piastra M, et al. Noninvasive pressure-support ventilation in immunocompromised children with ARDS: a feasibility study, *Intensive Care Med.* 2009 Aug;35(8):1420-7
- Piastra M, et al. Treatment of acute respiratory failure by helmet-delivered non-invasive pressure support ventilation in children with acute leukemia: a pilot study, *Intensive Care Med.* 2004 Mar;30(3):472-6

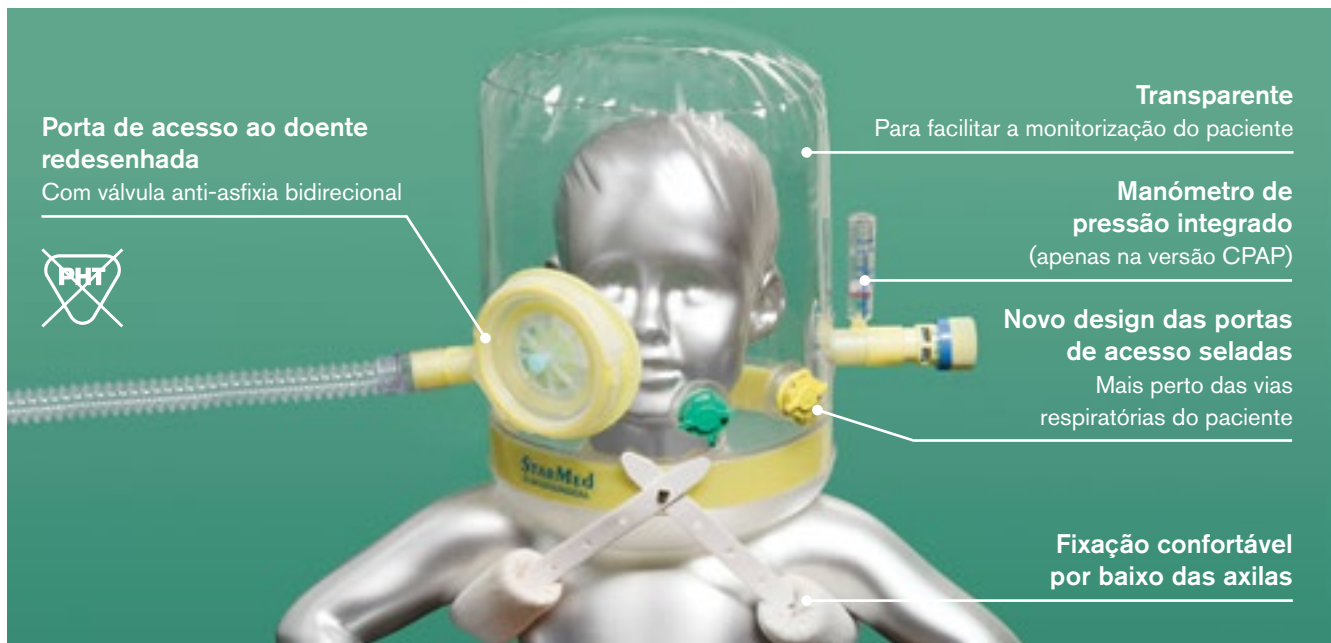

Capacete pediátrico CaStar Ped para terapia CPAP e VNI com válvula anti-asfíxia bidirecional e porta de acesso ao paciente*

Código	Descrição	Peso do paciente	Qtd. Caixa
CP201PED/2R	CaStar R Ped para VNI com conectores 22M/22M	>15Kgs	5
CP200PED/2	CaStar Ped para CPAP com conectores 22M/22F	>12Kgs	5




www.intersurgical.pt/info/starmed

Pedir uma informação

*Válvula e tubos PEEP não incluídos, devem ser encomendados separadamente. Consultar o website para conhecer a gama de acessórios.



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt

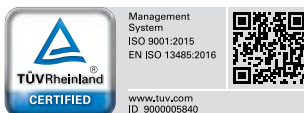

Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Itália

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.19_PT • Issue 8 06.20