



STARMed CaStar R Up

Capacete destacável para ventilação mecânica não invasiva (VNI)



Cuidados Intensivos ▪ Interfaces do doente ▪ **STARMed**



Capacete destacável StarMed CaStar R Up para VNI

StarMed CaStar R Up

O CaStar R Up destacável é um interface para o paciente confortável, versátil e leve para ventilação mecânica não invasiva (VNI) concebido para oferecer uma alternativa aos métodos tradicionais de entrega VNI. O CaStar R Up é bem tolerado por longos períodos e pode reduzir os riscos associados tanto à entubação endotraqueal como ao uso de máscaras faciais. Pode ser utilizado em posição semi-reclinada, supina e decúbito ventral, proporcionando uma alternativa ideal para a terapia VNI.


Vantagens

- Permite o rápido acesso ao doente durante o procedimentos de enfermagem ou em caso de emergência
- Uma pessoa pode remover facilmente a parte superior do capacete e ter pleno acesso ao paciente
- Sondas e cateteres podem permanecer no seu lugar, no doente, ligados à parte inferior do capacete

Características técnicas

- Fabricado a partir de materiais sem ftalatos
- Conectores 22M em conformidade com a norma ISO
- Almofada de pescoço insuflável integrada para maior conforto do doente
- Cintas de fixação das axilas confortáveis e atraumáticas
- Se necessário, estão disponíveis outros acessórios de fixação
- Duas portas de acesso seladas versáteis adequadas para sondas ou cateteres de lúmen simples ou múltiplos
- Novo design da porta de acesso ao paciente. Equipada com válvula anti-asfixia bidirecional que abre automaticamente em caso de falha de pressão
- A vedação hermética do sistema é conseguida através de uma membrana elástica em contacto com a parte superior do tronco quando o capacete é insuflado

Leia sobre mais evidências em www.intersurgical.pt

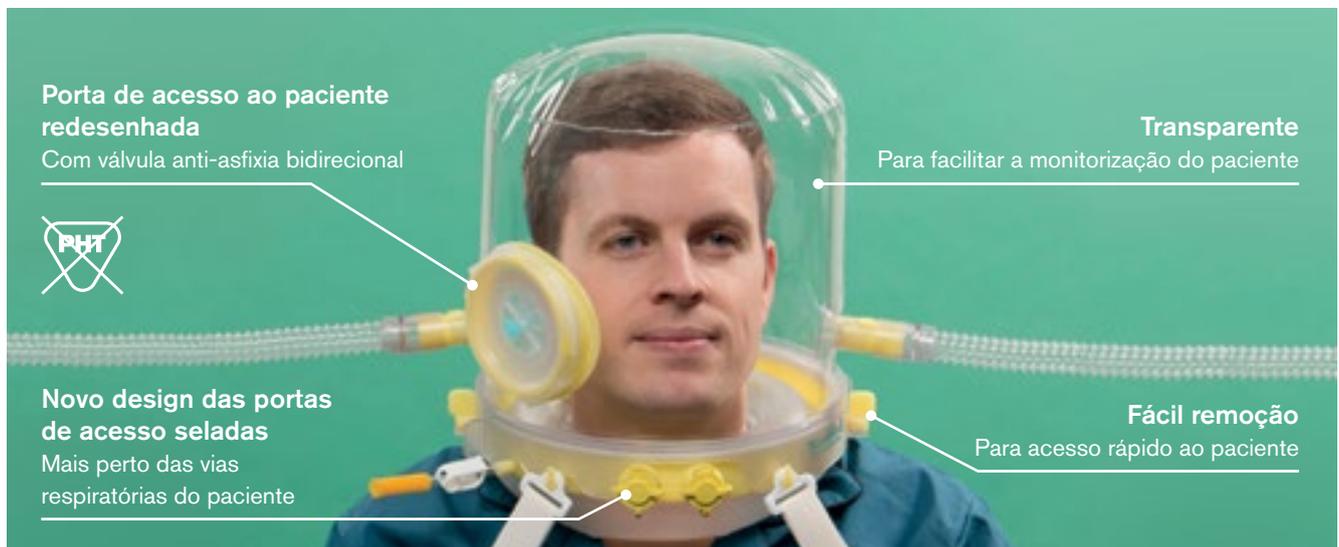

Capacete CaStar que abre para VNI com almofada de pescoço insuflável com válvula anti-asfixia bidirecional e porta de acesso ao paciente*

Código	Tamanho	Circunferência do pescoço	Qtd. Caixa
CA022XXL/2R	Extra Extra Grande	≥50cm	5
CA022XL/2R	Extra Grande	45-52cm	5
CA022L/2R	Grande	40-47cm	5
CA022M/2R	Médio	34-41cm	5
CA022S/2R	Pequeno	27-34cm	5
CA022XS/2R	Extra Pequeno	17-27cm	5



www.intersurgical.pt/info/starmed

Pedir uma informação

*Tubos não incluídos, devem ser encomendados separadamente. Consultar o website para conhecer a gama de acessórios.



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Itália

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.39_PT • Issue 5 06.20