



Intersurgical TrachSeal™

Sistemas fechados de aspiração



Cuidados intensivos ▪ TrachSeal



Cateter de aspiração

Disponível em quatro tamanhos para adulto e em dois comprimentos para ligação a tubos endotraqueais ou de traqueostomia

Porta de irrigação com tampa acoplada

Para prevenção da perda accidental da tampa

Extremidade macia com "olho de Murphy"

Permite a aspiração delicada das secreções do doente

Válvula de isolamento

Isola o cateter para lavagem nos sistemas de 72 horas

Na posição fechada, a válvula impede o avanço accidental do cateter

Ligação em cotovelo dupla giratória

Facilita os movimentos do doente e previne os traumatismos

Dispositivo de desconexão

Para remoção do sistema fechado de aspiração dos tubos endotraqueais e de traqueostomia com um nível mínimo de desconforto para o doente

Tubo de ligação flexível

Pode ser adicionado para aumentar a flexibilidade e o conforto do doente

Marcação do comprimento do cateter

Indicação da profundidade de modo a facilitar o posicionamento do cateter

Bainha melhorada

Transparente: permite uma vigilância constante das secreções do doente

Resistente: com aumento da sensibilidade na inserção do cateter


Silenciosa: menos ruído, garantindo que o doente não é incomodado

Codificação por cores

De acordo com as Normas Internacionais para uma fácil identificação do tamanho do produto

Válvula de aspiração ergonómica

Permite um controlo perfeito da força de aspiração aplicada e um dispositivo de bloqueio para reduzir o risco de ser accidentalmente pressionado

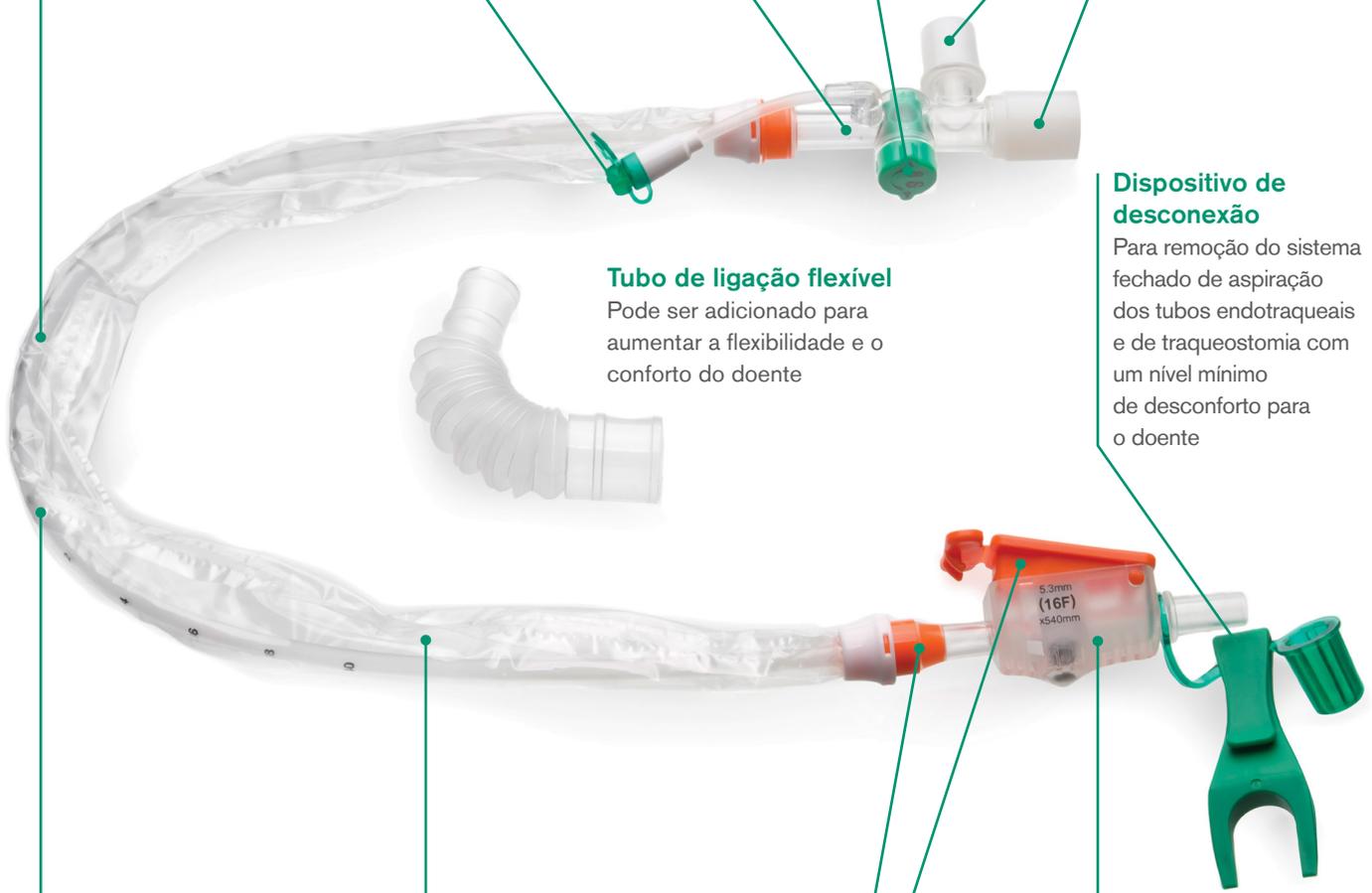

TrachSeal™

TrachSeal 24 horas

	Código	Descrição	Tamanho	Quant.
●	3240003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	F10	15
○	3240000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	F12	15
●	3240001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	F14	15
●	3240002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	F16	15
●	3240004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	F10	15
○	3240005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	F12	15
●	3240006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	F14	15
●	3240007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	F16	15

TrachSeal 72 horas

	Código	Descrição	Tamanho	Quant.
●	3720003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	F10	15
○	3720000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	F12	15
●	3720001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	F14	15
●	3720002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	F16	15
●	3720004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	F10	15
○	3720005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	F12	15
●	3720006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	F14	15
●	3720007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	F16	15

TrachSeal 72 horas com ampolas de solução salina

	Código	Descrição	Tamanho	Quant.
○	3721000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72, horas com 10 ampolas de solução salina	F12	15
●	3721001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72, horas com 10 ampolas de solução salina	F14	15
●	3721002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72, horas com 10 ampolas de solução salina	F16	15
○	3721005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	F12	15
●	3721006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	F14	15
●	3721007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	F16	15

Acessórios

	Código	Descrição	Quant.
	3022000	Acessório de ramificação do tubo de aspiração para sistemas fechados de aspiração e linhas de cuidados orais	25
	3700000	Solução 15ml estéril 0,9% NaCl para sistemas de aspiração fechados	70

IS1.27 PT • Issue 4 02.16



Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 9656 300 F: +44 (0)118 9656 356 info@intersurgical.com www.intersurgical.com

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy
Netherlands ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Colombia ▪ Australia



Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this e-mail
please print it double sided

Intersurgical Ltd is certified to ISO 14001, ISO 9001 and ISO 13485